



CARETRACKER

GPS-UR

Care Tracker beskytter
demensramte mod at blive væk.

Vi designer og udvikler systemer,
som skaber tryghed og frihed for
både mennesker med demens og
deres pårørende.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

Om uret	4
Generelt om uret	5
Sådan oplader du uret	5
Sådan tænder du uret	5
 Sådan kommer du i gang	6
Download appen	7
Opret en bruger	8
Tilslut din enhed	9
 Enhedsindstillinger	10
Omdøb	11
Notifikationer	11
Geofence	11
Nødopkald	12
Skridttæller	12
Urskivedesign	12
Godkende telefonnumre	12
Administrer alarmmodtagere	13

Find GPS	14
Ring til enhed	15
Afspil lyd	15
Vis din lokation	15
 Historik	16
 Brugerindstillinger	18
Kontoindstillinger	19
Notifikationer	19
Skift adgangskode	19
Skift pin	19
Abonnement	20
Vejledninger	20
Privatlivspolitik	20
Support	20

OM URET



GENERELT OM URET

Urets skærm er som udgangspunkt slukket. For at aktivere skærmen kan du trykke på knappen på siden af uret.

SÅDAN OPLADER DU URET

Hvis skærmen ikke tænder, når du trykker på knappen, er batteriet tomt. Sæt uret i opladeren. Det tager cirka 1 time og 45 minutter at oplade uret til 100%.

SÅDAN TÆNDER DU URET

Uret tænder automatisk, når det sættes i opladeren.

SÅDAN KOMMER DU I GANG

GPS-uret bæres af personen med demens. App'en bruges af en eller flere pårørende.

1

DOWNLOAD APPEN

Hent ned Care Tracker appen ned på din telefon.



Hvis du har
iPhone (Apple/iOS):

Åbn App Store på din telefon, tryk på søgefeltet og skriv '**Care Tracker**'. Når du ser appen i søgeresultatet, trykker du på '**Hent**'.



Hvis du har
Android (Samsung, OnePlus, m.fl.):

Åbn Google Play Butik på din telefon, tryk på søgefeltet, og skriv '**Care Tracker**'. Når du ser appen i søgeresultatet, trykker du på '**Installer**'.

2

OPRET EN BRUGER

Åbn appen på din telefon, derefter:

1. Klik på "Login"
2. Klik på "Opret ny bruger"
3. Indtast den email du har registreret dig med, og tryk derefter på "Fortsæt".
4. Du modtager en engangskode på mail/SMS. Indtast koden for at bekræfte, at det er dig, og gå videre.
5. Opret en adgangskode.
6. Log ind med dine oplysninger i appen.
7. Opret en firecifret PIN-kode.

3

TILSLUT DIN ENHED

Kobl appen og GPS-uret sammen. Sørg for, at GPS-uret har strøm.


1. Klik på plus-ikonet neders på skærmen i appen.
2. Tryk på knappen på dit ur, så skærmen tænder.
3. Swipe to gange fra højre mod venstre på urskiven, indtil uret viser følgende:



4. Scan urskiven med kamerafunktionen i appen.

Din enhed er nu oprettet og tilknyttet din Care Tracker-bruger.

ENHEDS- INDSTILLINGER

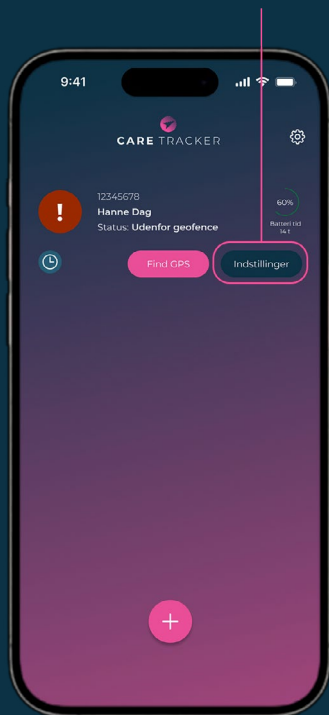

1

OMDØB

Her kan du til enhver tid ændre navnet på uret.

2

NOTIFIKATIONER

Vælg, om du vil have notifikationer på din telefon, om der skal være lyd og/eller vibration, og hvilken alarmlyd du foretrækker.

3

GEOFENCE

Ved at angive et geofence kan du få besked, når den demente bevæger sig uden for det område, du har angivet.

1. Klik på plus-ikonet.
2. Giv geofencet et navn (f.eks. "Hjemme").
3. Indtast adressen for midten af geofencet.
4. Vælg den afstand fra adressen, hvor du ønsker at blive varslet.
5. Klik på "Gem".

4

NØDOPKALD

Indstil uret til at ringe til et bestemt telefonnummer. For at ringe fra uret skal du holde knappen inde i 3 sekunder.

5

SKRIDTTÆLLER

Aktiver eller deaktiver skridttælleren.

6

URSKIVEDESIGN

Vælg mellem tre forskellige urskiver.

7

GODKENDTE TELEFONNUMRE

Her kan du angive telefonnumre, der kan ringe til uret.

8

ADMINISTRER ALARMMODTAGERE

Hvis du ønsker, at flere skal have tilgang til appen.

1. Klik på plus-ikonet nederst på skærmen.
2. Indtast navn, telefonnummer og e-mailadresse.
3. Klik på "Tilføj".

De vil nu modtage en e-mail med en invitation til at downloade appen og oprette en bruger.

Du kan til enhver tid tilføje, fjerne eller sætte en alarmmodtager som passiv.

FIND GPS



1

RING TIL ENHED

Tryk på 'Ring til enhed', hvis du ønsker at ringe til GPS-uret. Uret besvarer automatisk opkaldet, så den pågældende ikke behøver at gøre noget. Uret understøtter tovejssamtale, så I kan føre en samtale.

2

AFSPIL LYD

Tryk på 'Afspil lyd', hvis du ønsker, at uret skal afgive lyd. Lyden stopper automatisk efter 20 sekunder.

3

VIS DIN LOKATION

Hvis du på kortet ønsker at se din position i forhold til urets placering, kan du trykke på knappen 'Vis din lokation'.

HISTORIK



HÆNDELSETYPE

Angiver, hvad der er sket, f.eks.

"Udenfor geofence", så du hurtigt kan se bevægelserne.

DATO OG TID

Viser præcist, hvornår hændelsen fandt sted, så du kan følge beboerens bevægelser over tid og opdage eventuelle mønstre.


BESKRIVELSE

En kort forklaring, der giver kontekst til hændelsen, f.eks. om beboeren har forladt eller vendt tilbage til geofencet.

HÅNDTERING

Viser, hvem der har reageret på hændelsen, så det bliver nemt at koordinere med andre pårørende, hvis du har tilføjet flere alarmmodtagere.

BRUGER INSTILLINGER

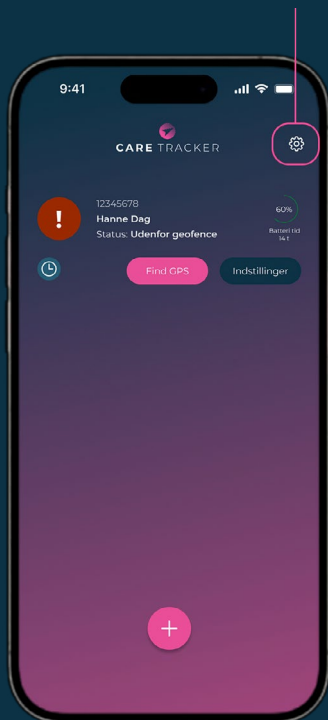

1

KONTOINDSTILLINGER

Her kan du se og ændre dine brugeroplysninger.

2

NOTIFIKATIONER

Juster, om du ønsker notifikationer på din telefon, om du vil have lyd og/eller vibration, samt hvilke alarmlyde du foretrækker.

3

SKIFT ADGANGSKODE

Angiv din gamle og nye adgangskode for at ændre adgangskoden.

4

SKIFT PIN

Skift den PIN-kode, der skal bruges for at få adgang til appen.

5

ABONNEMENT

Se dine abonnementsoplysninger.

6

GUIDES

Alle vejledninger er lige ved hånden – når som helst.

7

PRIVATLIVSPOLITIK

Læs vores persondatapolitik.

8

SUPPORT

Besøg vores hjemmeside for yderligere information om produktet eller for at kontakte os for hjælp.



CARETRACKER

Care Tracker beskytter
demensramte mod at blive væk.

Vi designer og udvikler systemer,
som skaber tryghed og frihed for både
mennesker med demens og deres
pårørende.

Vores mission er at være de
bedste i verden til at lokalisere,
mennesker der savnes.

Care Tracker ApS | info@caretracker.dk
| www.caretracker.dk